

Storage 系统使用手册

1. 在仪器上注册同步目录

每个仪器电脑的桌面上都会有“数据同步目录注册”这一快捷方式



双击打开运行窗口，输入校内统一身份认证用户名和密码，点击“Submit”按钮出现路径页面,则注册成功

软件将会自动创建对应的同步目录文件夹，并显示对应的存储路径,注册完毕后关闭此窗口即可。

注意：请确保自己的同步目录是由软件自动生成的，请勿自己创建相同格式的同步目录，这可能导致同步上传失败！



仪器注册过程中可能会出现以下失败的情况

问题 1：注册时出现[xxxx] 不在库中,请联系管理员加.



说明该用户暂时不在学校数据库中，请联系平台老师进行用户的添加。

问题 2：注册时出现 Account or Password error.

说明用户密码不正确，请重新确认并输入。



2. 登录

通过校内局域网访问以下对应的站点来访问西湖大学共享存储平台（或者使用校内 vpn 登录）。

使用校内统一身份认证平台登录也可看到共享存储平台登录门户



网站导航



咨询服务



电子资源



IT指南



校园黄页

业务系统



预约中心



共享存储平台



实验室综合
管理系统



数据平台



网办大厅



OA办公



人力资源管
理



财务系统

学校文件

关于肖蓉等任职的通知

OHR 人力资源部

西湖大学教职工董事推选办

OHR 人力资源部

西湖大学技术支撑人员聘任

OHR 人力资源部

关于调整西湖大学财经工作

共享存储平台共有两个地址，当使用校内实验资源网时，只能访问地址 2 访问。

访问地址 1: <http://172.16.75.31:7000/index.html>

访问地址 2: <http://172.18.21.192:7000/index.html>

登录



用户名 (工号/学号):

密码:

[Forgotten your password? Reset your password](#)



当完成登录后，可点击右侧菜单栏，选择数据概览，点击对应平台进行展开，即可看到注册过的所属仪器。

点击对应仪器即可看到所存放的实验数据。

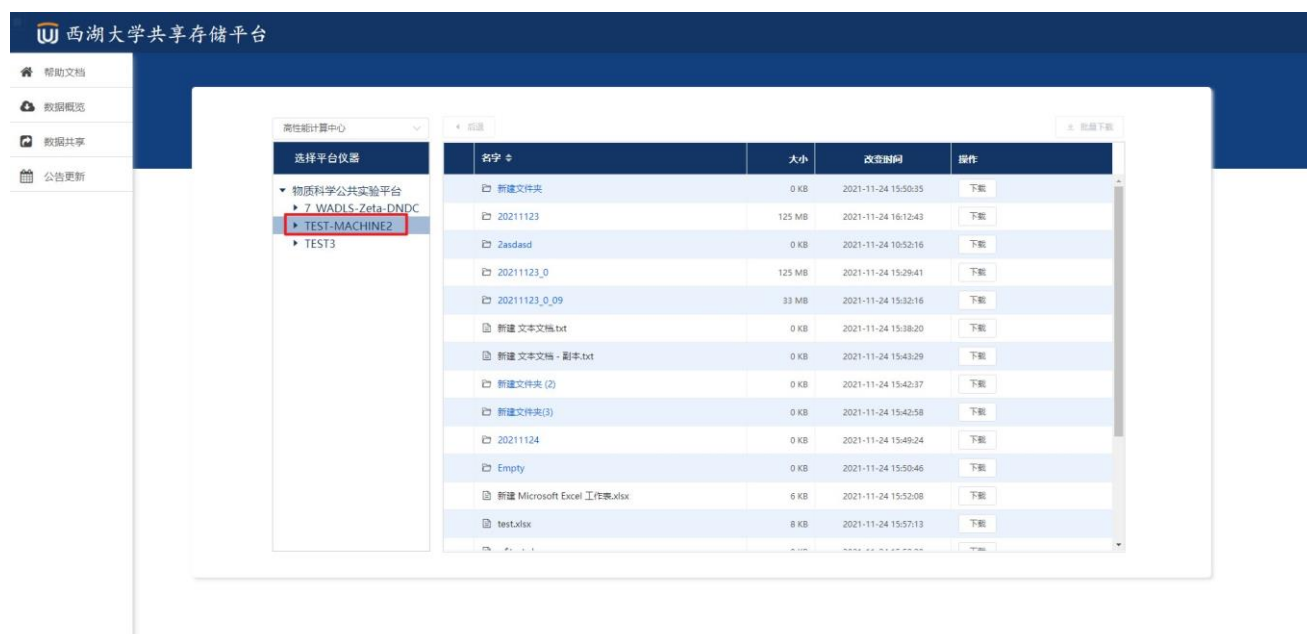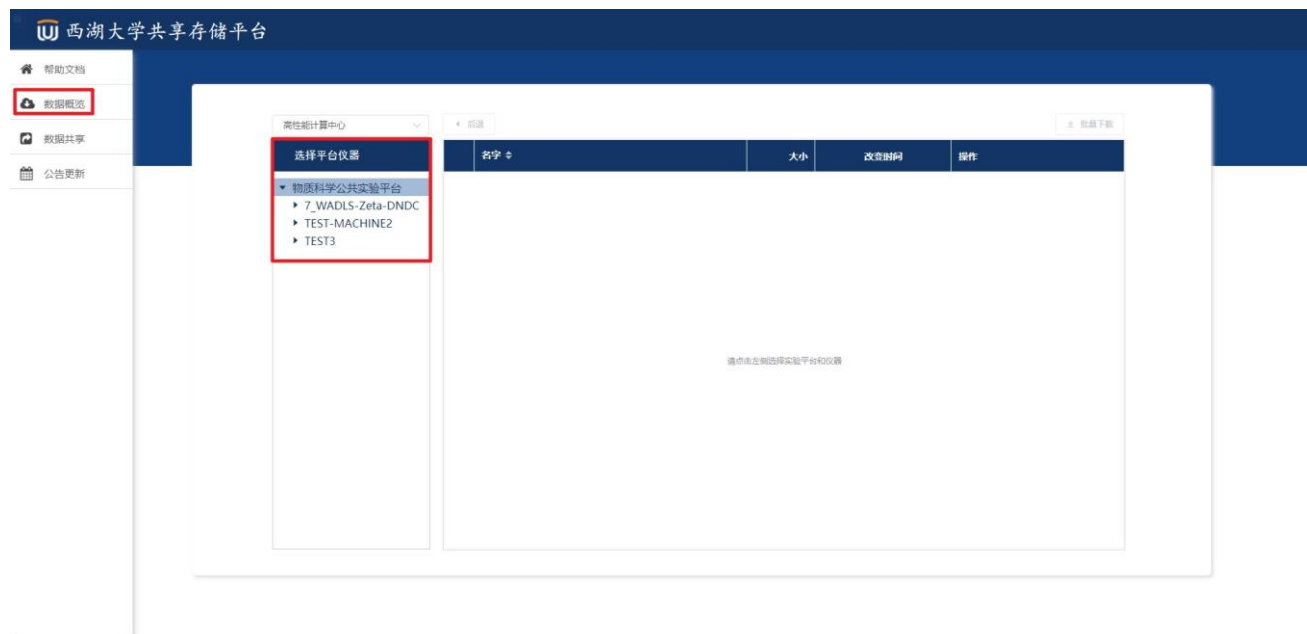


3. 文件预览

目前本系统支持 pdf、图片(jpg/png/bmp/jpeg)的在线预览，如果需要在线预览更多格式，可以向平台老师提出。

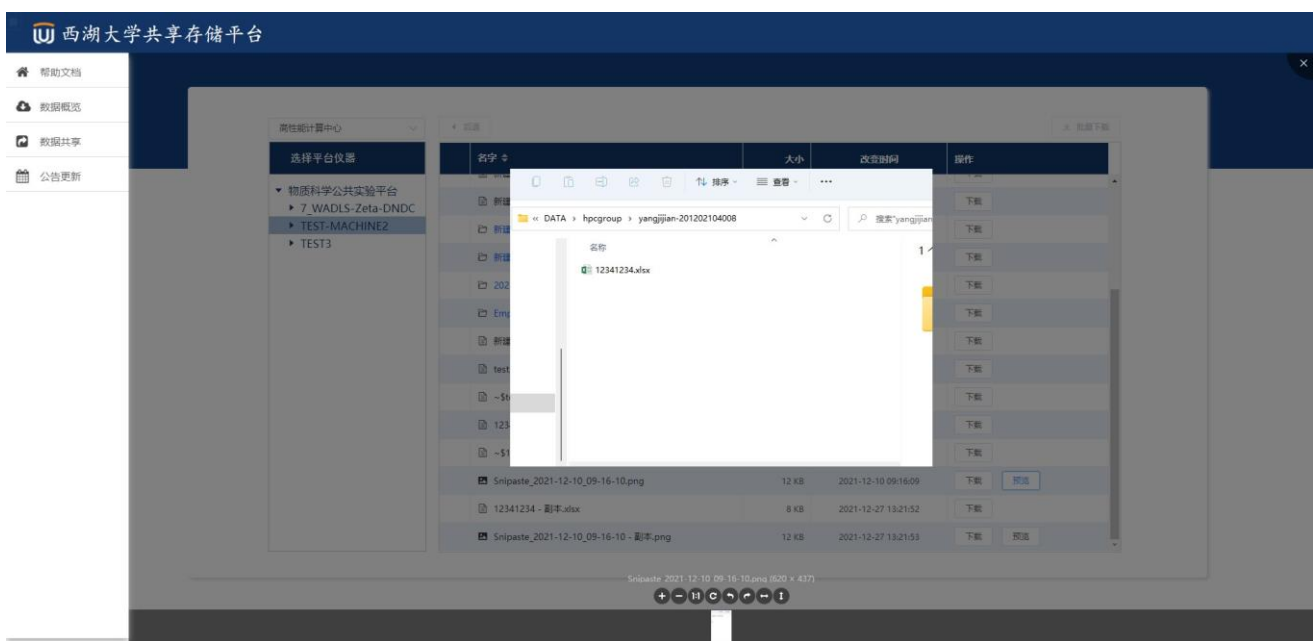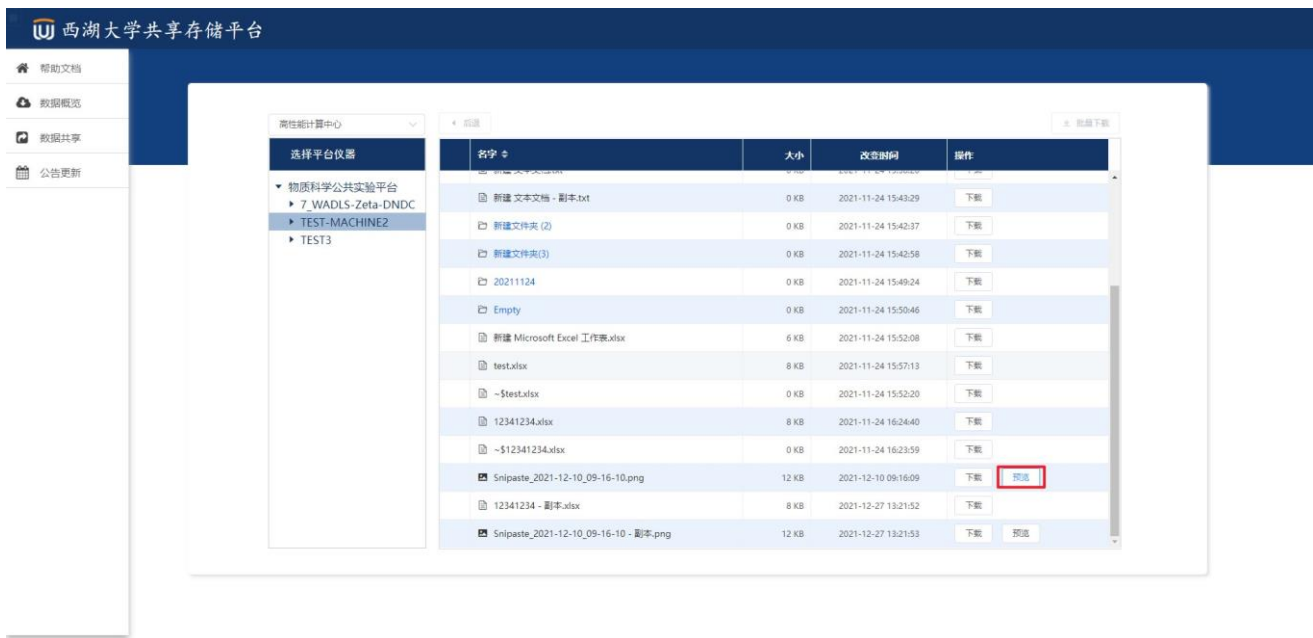

4. 单文件下载

在文件列表中，点击文件后的下载按钮，即可调用浏览器的下载功能进行单文件的下载。

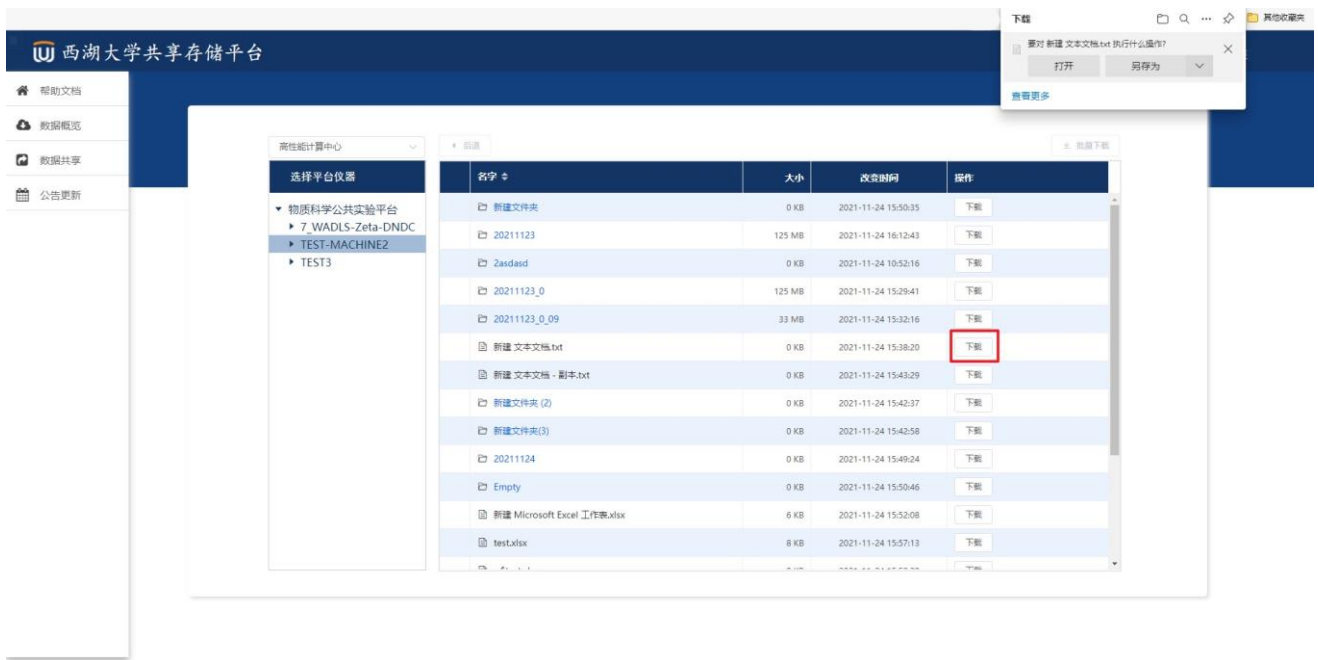


5. 目录下载

若要使用目录下载功能,请点击网页端中的客户端下载

使用实验平台数据存储系统客户端进行多文件的批量下载下载说明详见:

[实验平台数据存储系统客户端使用手册](#)

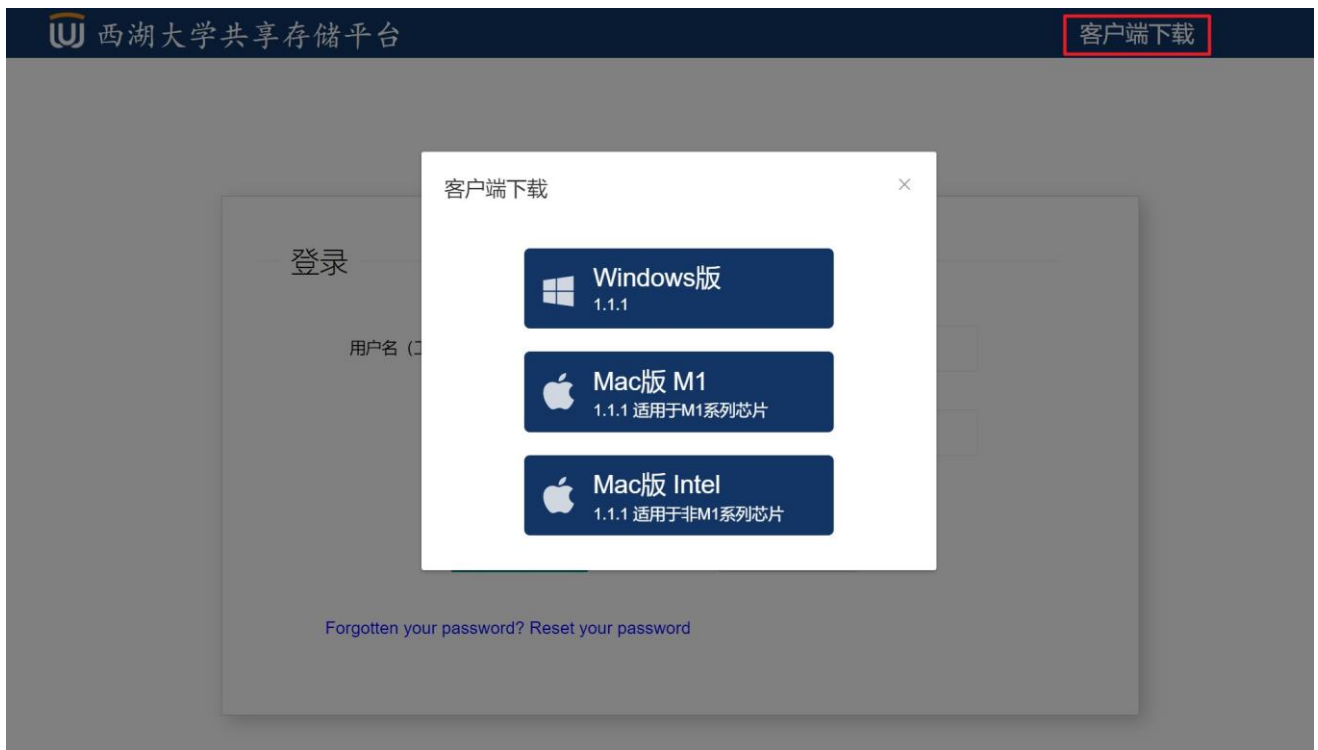

6. 多文件下载


若要使用多文件下载功能,请点击网页端中的客户端下载

使用实验平台数据存储系统客户端进行多文件的批量下载说明详见: [实验平台数据存储系统客户端使用手册](#)



7. 换组后获取以往组数据

更换课题组后, 登录共享存储平台, 选择右侧数据概览功能, 点击左上角的组信息可以选择更换到之前的组, 即可正常查看历史保存的相关数据。

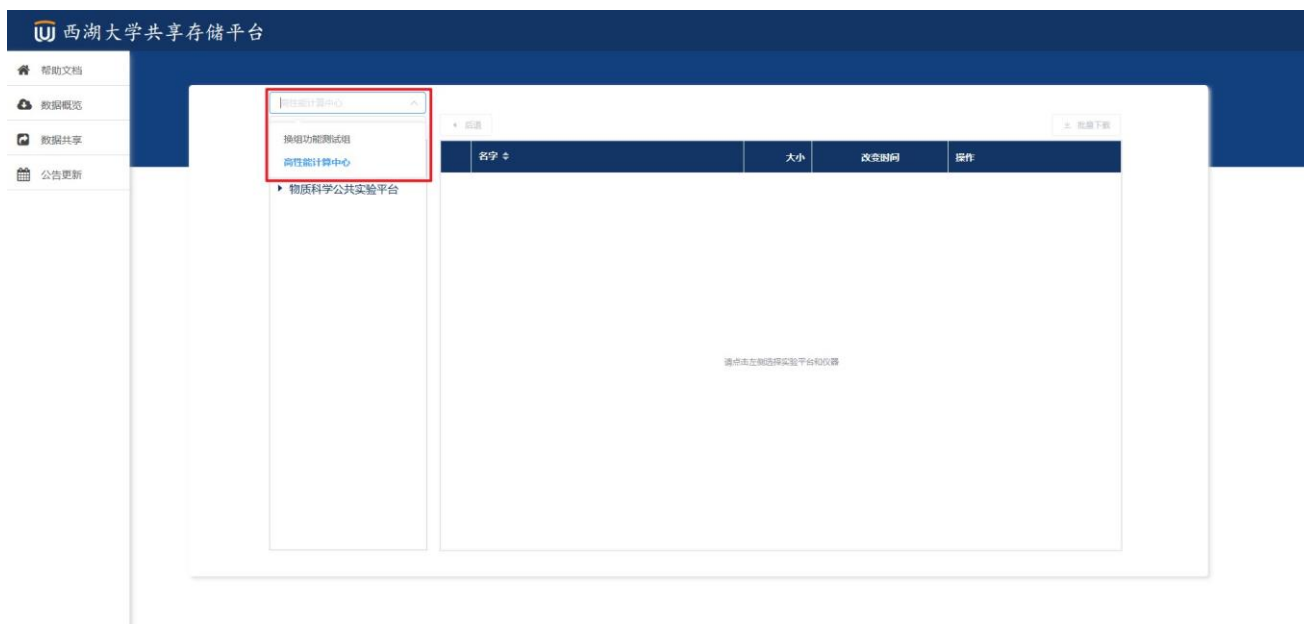

8. 组长查看所有组员数据

组长登录共享存储平台后，可以选择对应的组下的用

户来查看当前组员保存的数据。

